



Läkemedel, Vätskebalans, Melior

Vätskebalans är oberoende av vårdtillfällen och öppnas via menyn **Läkemedel** (när patientens journalmapp är framme).

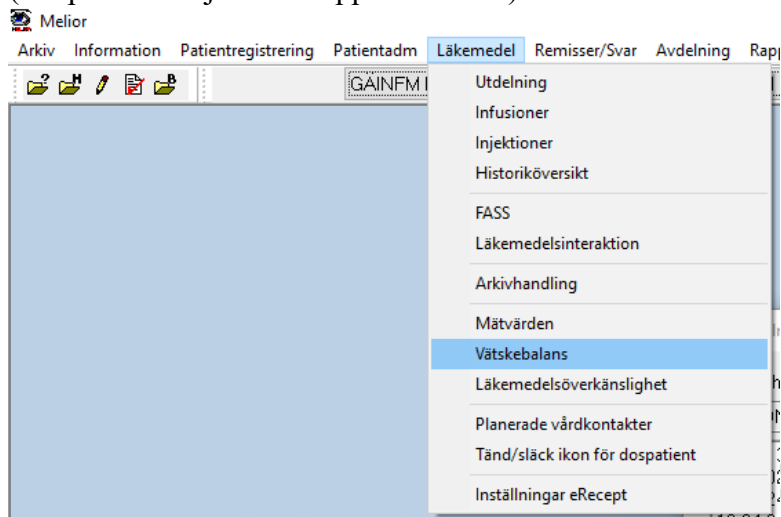

Vätskebalans är endast en visningsvy, plus- och minusposter hämtas från **Mätvärden** som är konfigurerade som plus- eller minusposter till vätskebalansen samt infusioner från **Utdelningslistan**.

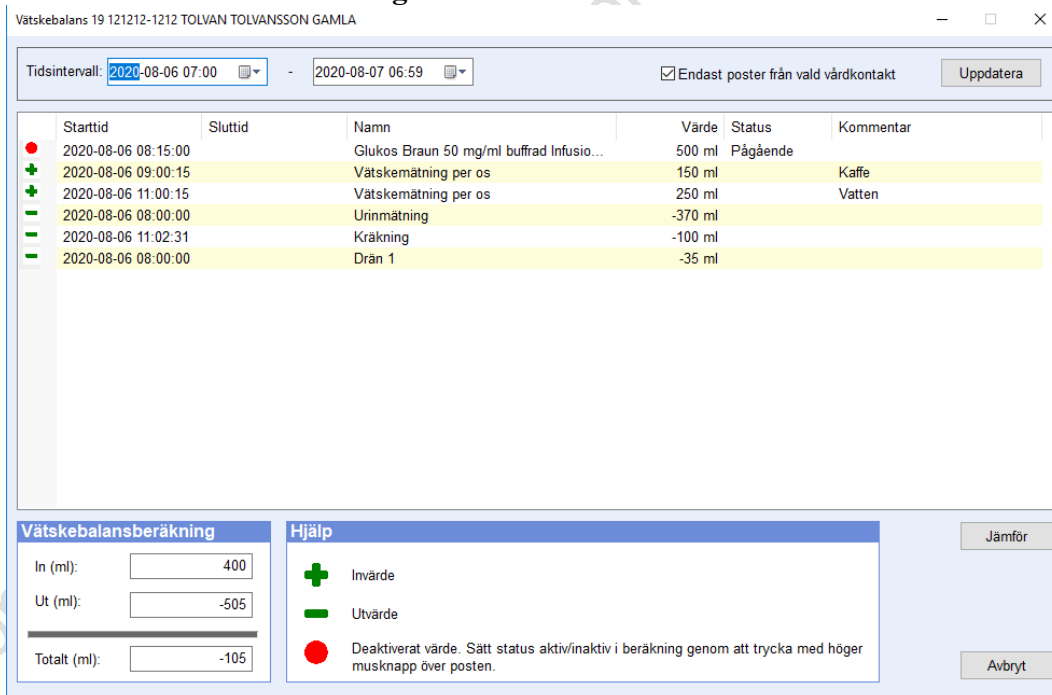

The screenshot shows the 'Vätskebalans 19 121212-1212 TOLVAN TOLVANSSON GAMLA' interface. It includes a time interval filter (2020-08-06 07:00 - 2020-08-07 06:59) and a table of fluid balance entries. Below the table is a 'Vätskebalansberäkning' section with input fields for 'In (ml)' (400) and 'Ut (ml)' (-505), resulting in a 'Totalt (ml)' of -105. A 'Hjälp' section provides instructions on how to use the interface.

	Starttid	Sluttid	Namn	Värde	Status	Kommentar
●	2020-08-06 08:15:00		Glukos Braun 50 mg/ml buffrad Infusio...	500 ml	Pågående	
+	2020-08-06 09:00:15		Vätskemätning per os	150 ml		Kaffe
+	2020-08-06 11:00:15		Vätskemätning per os	250 ml		Vatten
-	2020-08-06 08:00:00		Urinmätning	-370 ml		
-	2020-08-06 11:02:31		Kräkning	-100 ml		
-	2020-08-06 08:00:00		Drän 1	-35 ml		


Infusioner och t.ex. mätvärdet *Vätskemätning per os* ger plus i Vätskebalans och t.ex. mätvärdena *Urinmätning* och *Drän* ger minus i Vätskebalans.

Infusioner visas i Vätskebalans när insättningstid angetts i Utdelningslistan.

Pågående infusioner ger inget plus i Vätskebalans förrän de är avslutade.

Förvalt tidsintervall som visas är dagens datum kl. 07.00 till imorgon kl. 06.59 för alla enheter utom enheter inom Barn- och ungdomssjukvården. Barn- och ungdomssjukvården har tidsintervall kl. 06.00 – 05.59 i Gävle och kl. 08.00 – 07.59 i Hudiksvall.

Du kan ändra tidsintervall genom att ändra datum/klockslag i fälten för tidsintervallet och klicka på knappen **Uppdatera**.

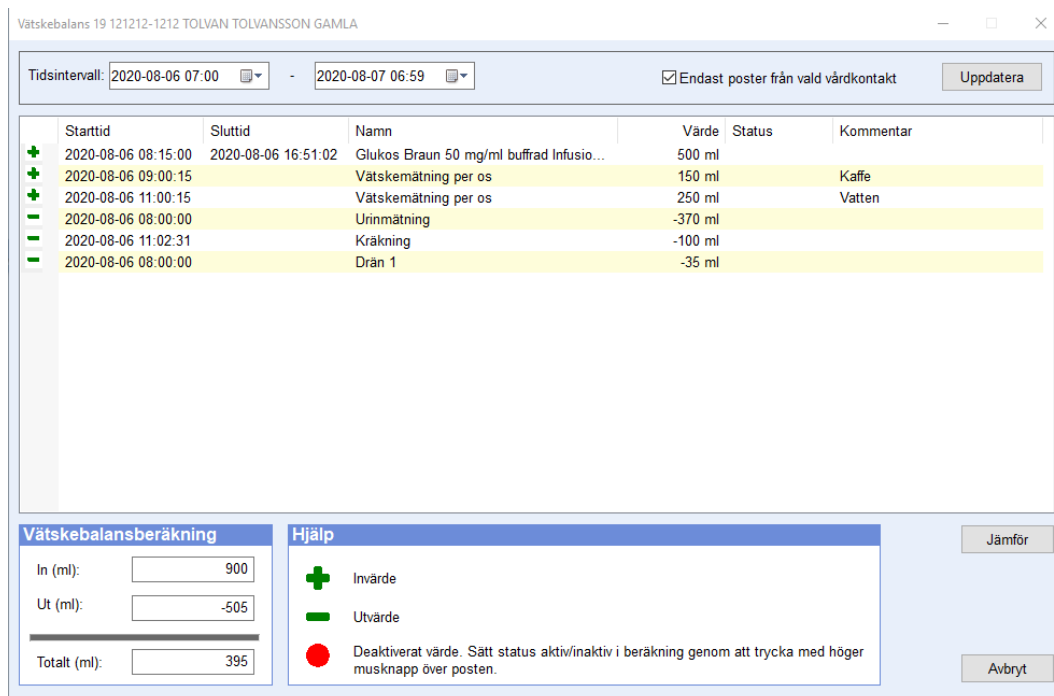

	Starttid	Sluttid	Namn	Värde	Status	Kommentar
+	2020-08-06 08:15:00	2020-08-06 16:51:02	Glukos Braun 50 mg/ml buffrad infusio...	500 ml		
+	2020-08-06 09:00:15		Vätskemätning per os	150 ml		Kaffe
+	2020-08-06 11:00:15		Vätskemätning per os	250 ml		Vatten
-	2020-08-06 08:00:00		Urinmätning	-370 ml		
-	2020-08-06 11:02:31		Kräkning	-100 ml		
-	2020-08-06 08:00:00		Drän 1	-35 ml		

Vätskebalansberäkning

In (ml):

Ut (ml):

Totalt (ml):

Hjälp

- + Invärde
- Utvärde
- Deaktiverat värde. Sätt status aktiv/inaktiv i beräkning genom att trycka med höger musknapp över posten.

Starttid = det datum/tid som anges för mätvärdet alternativt insättningstid som anges i Utdelningslistan för infusion

Sluttid = den tid för infusionslut som anges i Utdelningslistan för infusion

Namn = namn på mätvärdet alternativt namn på infusion i Utdelningslistan

Värde = ml som anges i Mätvärdesdelen alternativt ordinerad/verklig dos i ml (milliliter) eller l (liter) som anges för infusion i Utdelningslistan (observera att om infusion är ordinerad med annan dosenhet än ml eller l så visas inte denna i funktionen Vätskebalans)

Kommentar = eventuell kommentar till mätvärdet (kommentar angiven i Utdelningslistan visas inte i Vätskebalans)

● = Deaktiverat värde, d.v.s. posten räknas inte med i vätskebalansberäkningen

+ = Invärde, pluspost

- = Utvärde, minuspost


Den förvalda sorteringen av visade värden är att *Deaktiverade värden* visas överst, sedan *Invärden* och sist *Utvärden*.

Man kan tillfälligt välja bort att ta med ett värde i beräkningen av vätskebalansen genom att högerklicka på en rad med ett ”grönt plustecken/grönt minustecken”, då visas istället symbolen ”röd cirkel”. Denna tillfälliga deaktivering av ett värde

försvinner vid val av Uppdatera, om man avbryter Vätskebalans eller om man högerklickar på raden igen.

Vätskebalansberäkning

Observera att mätvärden eller infusioner som registrerats med l (liter) sker automatisk omräkning till ml (milliliter) när posterna presenteras i Vätskebalans.

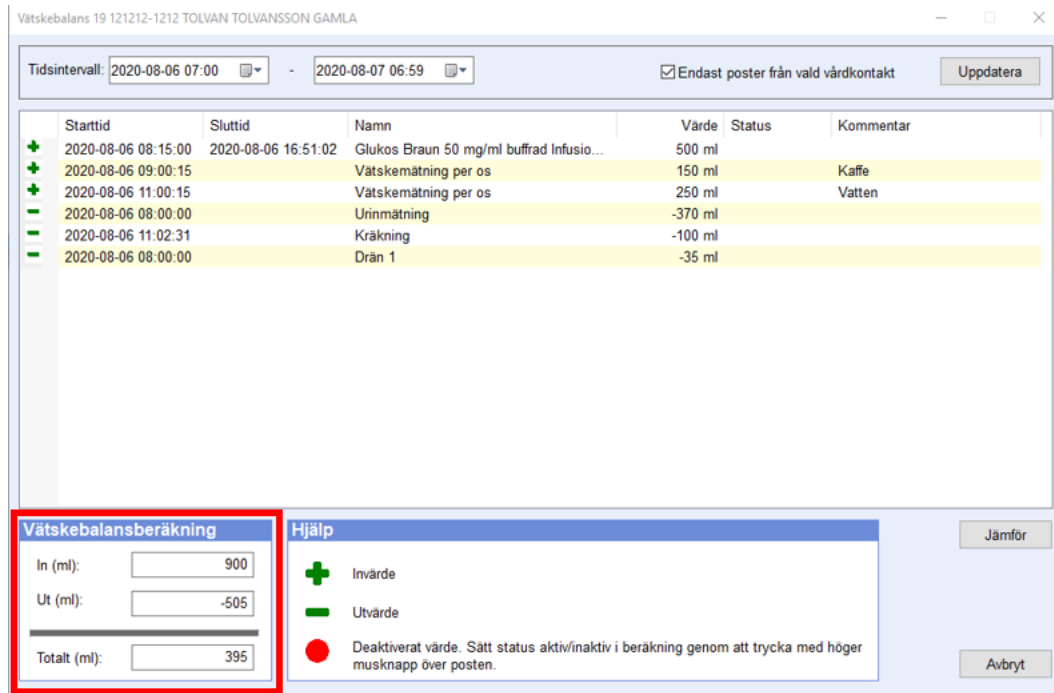

Vätskebalans 19 121212-1212 TOLVAN TOLVANSSON GAMLA

Tidsintervall: 2020-08-06 07:00 - 2020-08-07 06:59 Endast poster från vald vårdkontakt

	Starttid	Sluttid	Namn	Varde	Status	Kommentar
+	2020-08-06 08:15:00	2020-08-06 16:51:02	Glukos Braun 50 mg/ml buffrad infusio...	500 ml		
+	2020-08-06 09:00:15		Vätskemätning per os	150 ml		Kaffe
+	2020-08-06 11:00:15		Vätskemätning per os	250 ml		Vatten
-	2020-08-06 08:00:00		Urinmätning	-370 ml		
-	2020-08-06 11:02:31		Kräkning	-100 ml		
-	2020-08-06 08:00:00		Drän 1	-35 ml		

Vätskebalansberäkning

In (ml):

Ut (ml):

Totalt (ml):

Hjälp

- + Invärde
- Utvärde
- Deaktiverat värde. Sätt status aktiv/inaktiv i beräkning genom att trycka med höger musknapp över posten.

In (ml) = den totala mängd av plusposter från mätvärden och/eller infusioner från Utdelningslistan för det tidsintervall som valts.

Ut (ml) = den totala mängd av minusposter från mätvärden för det tidsintervall som valts.

Totalt (ml) = differensen mellan **In (ml)** och **Ut (ml)** för det tidsintervall som valts.