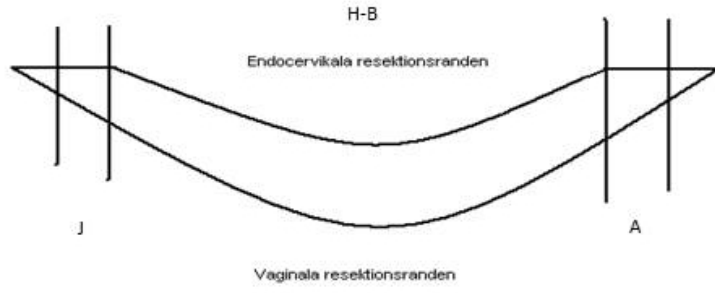


Provtagningsanvisning Histologi Cervixkon - Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller remiss PAD histopatologi
Provtagning	<p>Ange på remissen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provtyp • Kolposkopiskt fynd samt lokalisation • Indikation för åtgärden  <p>Konen skall vara uppklippt och ordentligt utspänd, som bilden visar. Konen får då en tydlig endocervikal resektionsrand och därmed bästa resultat vid utskärning på laboratoriet. Slemhinnan ska alltid vändas uppåt på korkplattan. Konen förutsätts vara uppklippt kl 12 om inget annat angetts.</p>
Förvaring/Transport	Provet fixeras i 4 % formaldehyd
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk patologi och cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	20 arbetsdagar
Akrediterad	Ja
Efterbeställning	Vid eventuell efterbeställning, kontakta Patologen
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	Inga övriga kommentarer
Medicinsk bakgrund/indikation	Pre-cancerösa cellförändringar

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-05-09	9	Lagt till rubriken Revideringar. Ändrat upprättare och slutgranskare.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet